


A LabVIEW ingyenes verziójának telepítése

1. Látogassunk el a <https://www.ni.com/hu-hu.html> oldalra és előbb a jobb felső sarokban kattintsunk a felhasználó ikonra, majd a felbukkanó menüben kattintsunk a **Create Account** menüpontra regisztráljuk magunkat! (A regisztráció ingyenes)

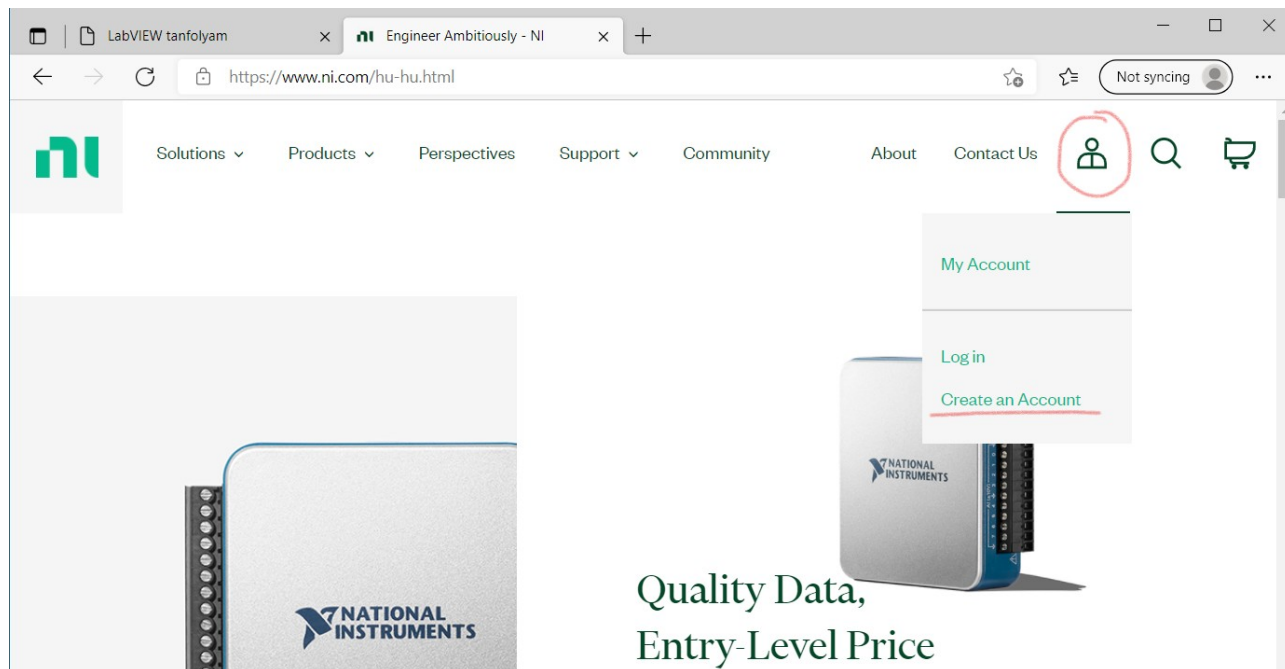


2. A fenti regisztráció után jelentkezünk is be, majd látogassunk el a LabVIEW Community Edition (LabVIEW Közösségi Kiadás) letöltési oldalára, az alábbi linkre kattintva: <https://www.ni.com/hu-hu/support/downloads/software-products/download.labview-community.html#411209>


3. Válasszuk ki az operációs rendszert (Windows) és a letölteni kívánt verziót (2021-es kiadás) és kattintsunk a jobb szélén látható DOWNLOAD (Letöltés) gombra. Ennek hatására letöltődik a 2.33 Gbyte terjedelmű **ni-labview-2021-community-x86_21.0.0_offline.iso** állomány, ami egy DVD képfájl, de nem kell vele szenvedni, mert a mai operációs rendszerek (mint pl. a Windows 10) megnyitáskor automatikusan felcsatolják és megnyitják az .iso állományt, mintha csak egy mappa lenne.

4. Nyissuk meg a letöltött .iso állományt és indítsuk el az **Install.exe** telepítő programot! Telepítés közben hagyjunk rá mindent és fogadjuk el (Accept...) a licenzfeltételeket!


5. A telepítés végén a telepítő program feldob egy ablakot, melyben jelzi, hogy használat előtt a terméket aktiválni kell. Az aktiváláshoz Internet kapcsolatra és az 1. pontban elkészített regisztráció adataira lesz szükség (E-mail cím, jelszó). A fizetős alkalmazással szemben A LabVIEW Community Edition szoftverhez nem kapunk licenckulcsot, hanem az NI azonosítónkkal be kell lépni. Ehhez kattintsunk a **Log in to activate** gombra, majd a felbukkanó ablakban adjuk meg a regisztrációs adatainkat!

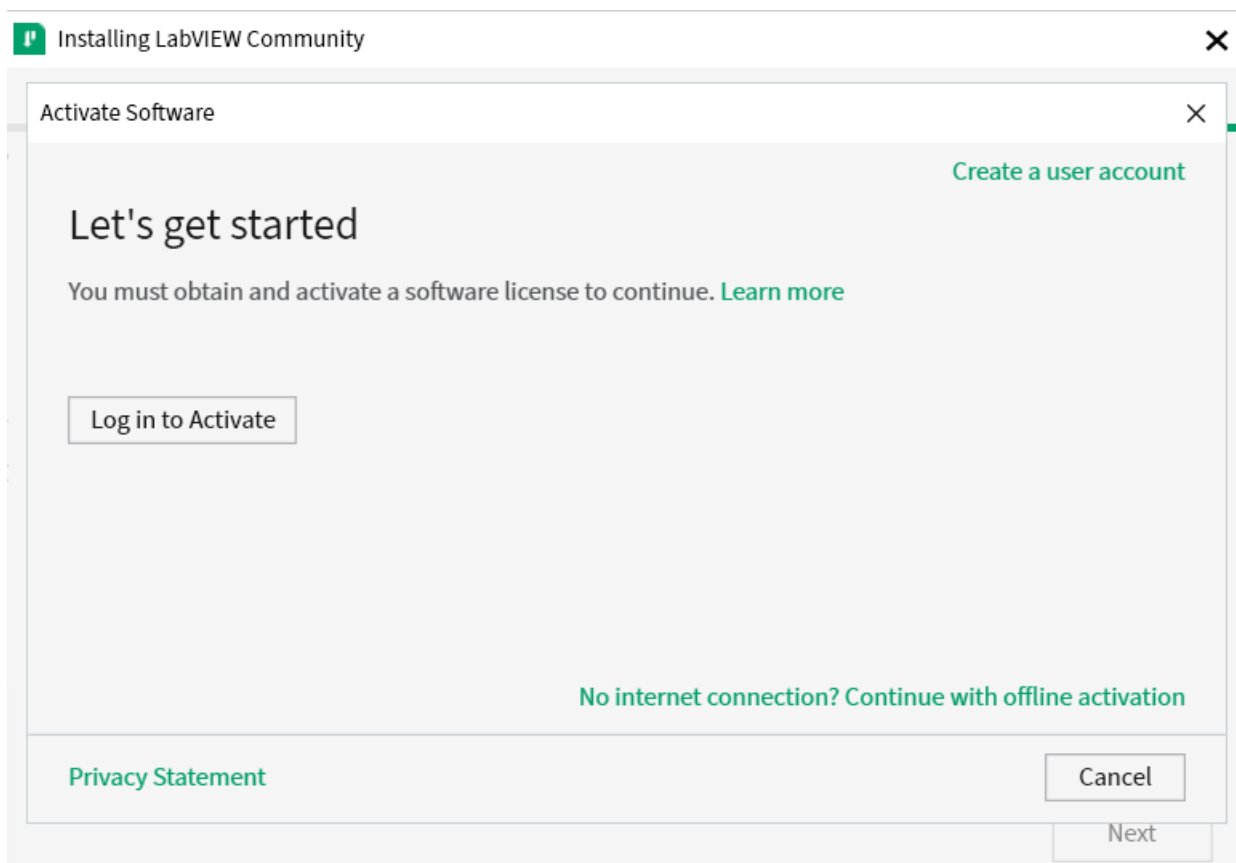

6. Ha a bejelentkezés sikeres volt, akkor kezdődhet a tényleges aktiválás, az ACTIVATE gomra kattintva. Ügyeljünk rá, hogy a számunkra alapértelmezett „Check my account for licenses” (ellenőrizd a felhasználói fiókomban rendelkezésre álló licenzeket) opció legyen kiválasztva, ahogy az alábbi ábrán is látszik

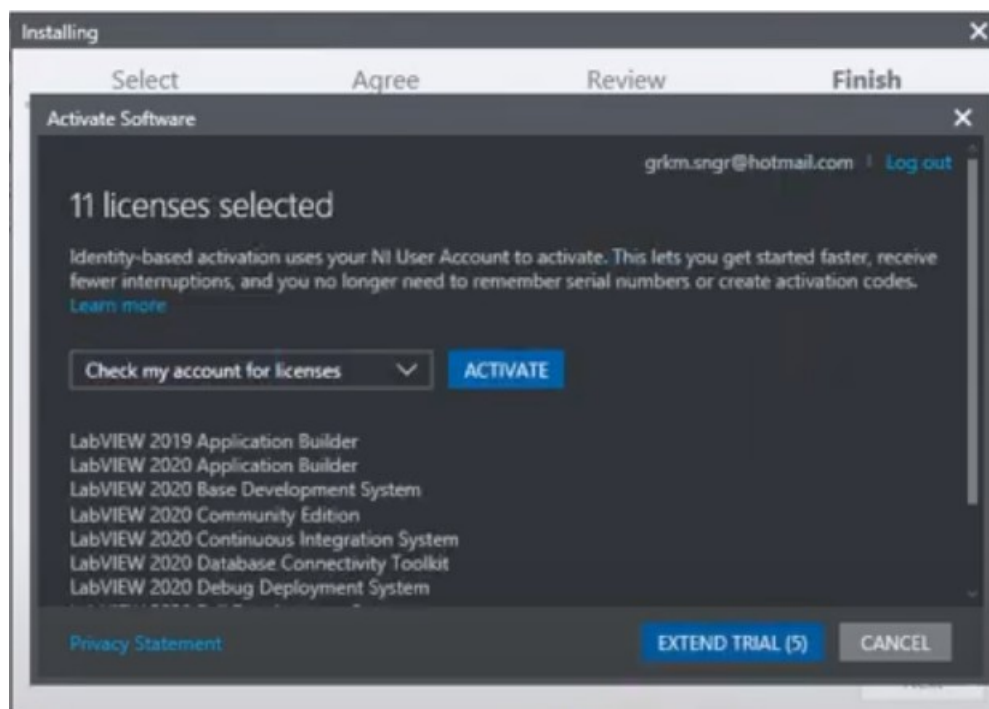

7. Sikeres aktiválás esetén az alábbihoz hasonló gratulációs képernyőképet kell kapnunk. Ekkor örülünk és a **Finish** gombra kattintva befejezzük a telepítést.

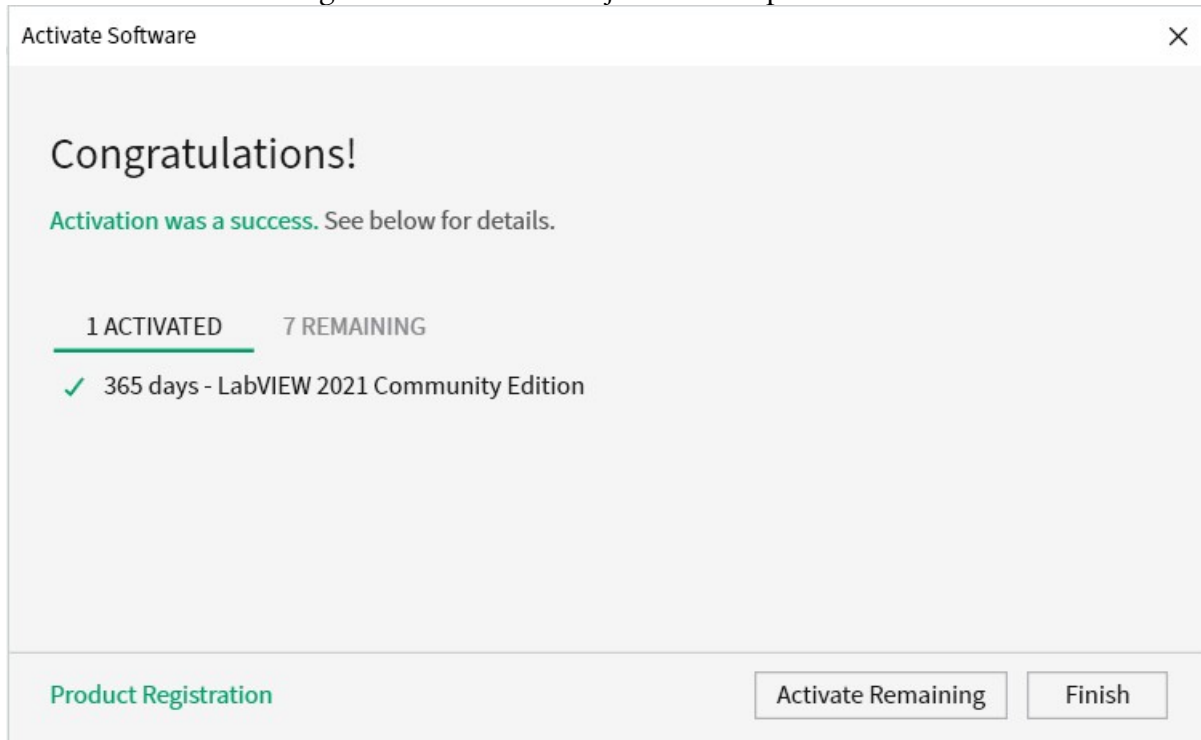

8. A LabVIEW használatához a **LabVIEW.exe** programot kell elindítani

9. A .vi állománynév-kiterjesztés a LabVIEW programhoz van rendelve, így egy .vi állományra duplán rákattintva automatikusan elindul a LabVIEW és betölti a kattintott alkalmazást.